


I Konfiguracja


Przed każdym użyciem urządzenia Neopuff należy przeprowadzić następującą procedurę w celu potwierdzenia prawidłowego działania tego urządzenia.

- 1 Skontrolować, czy manometr wskazuje zero i nie występuje przepływ gazu. Jeżeli nie, należy skalibrować manometr (zapoznać się z częścią 3.3.4 podręcznika technicznego).

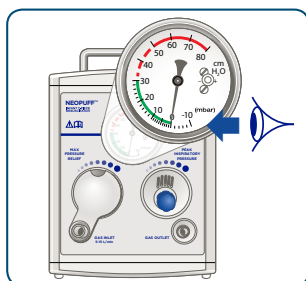


2 Podłączanie źródła gazu

Podłączyć źródło tlenu lub mieszanki tlen/powietrze do przyłącza wlotowego gazu za pomocą przewodu dostarczania gazu.

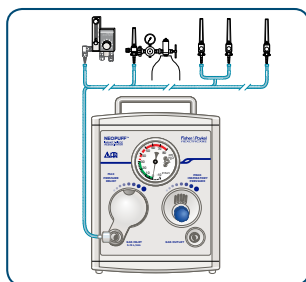

3 Podłączanie układu oddechowego ze złączem typu T

- Podłączyć układ oddechowy ze złączem typu T do przyłącza wlotowego gazu.
- W przypadku korzystania z ergonomicznego złącza typu T **i** należy pozostawić niebieską zatyczkę na miejscu w układzie oddechowym ze złączem typu T lub podłączyć płuco testowe do układu oddechowego ze złączem typu T. W przypadku korzystania z klasycznego złącza typu T **ii** należy podłączyć płuco testowe do układu oddechowego ze złączem typu T. Przed użyciem należy skontrolować płuco testowe pod kątem występowania oznak uszkodzenia, np. odbarwień.

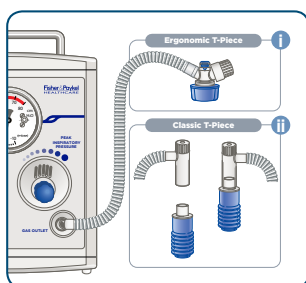


 Niniejsza zawieszka służy jedynie jako instrukcja konfiguracji.

W każdym przypadku przed użyciem należy zapoznać się i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania dla każdego elementu.

4 Kontrola ustawień

Wyregulować źródło gazu w celu ustawienia żądanej prędkości przepływu w zakresie od 5 do 15 L/min.


Uwaga: Upewnić się, że stężenie tlenu w źródle tlenu/powietrza jest monitorowane za pomocą analizatora tlenu lub zostało wstępnie ustawione za pomocą wykresów prędkości przepływu tlenu/powietrza.

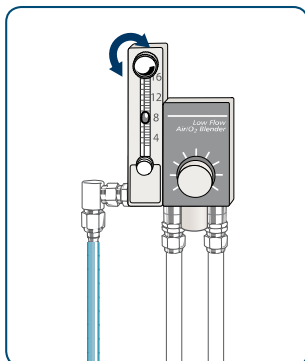

5a Kontrola maksymalnego ciśnienia

Zablokować zatyczkę PEEP¹ i przekręcić pokrętkę PIP² maksymalnie w prawo, aż wyczuwalny będzie opór (i lub ii).


1. Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe
2. Szczytowe ciśnienie wdechowe

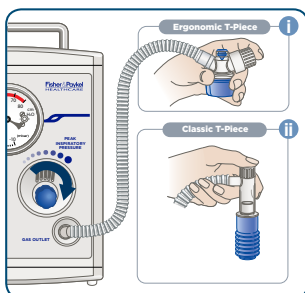

5b W celu ustawienia żądanego maksymalnego ciśnienia należy przekręcić pokrętkę ciśnienia maksymalnego w prawo lub w lewo.

Uwaga:

- Ustawienie fabryczne zaworu spustowego maksymalnego ciśnienia wynosi 40 cmH₂O [mbar].
- Zawór spustowy maksymalnego ciśnienia działa jako ogólny ogranicznik osiągalnego ciśnienia w układzie oddechowym. Nie można osiągnąć resuscytacji powyżej 40 cmH₂O [mbar], gdy nie wyregulowano zaworu spustowego maksymalnego ciśnienia.

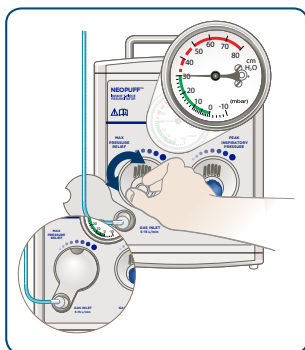


Niniejsza zawieszka służy jedynie jako instrukcja konfiguracji.

W każdym przypadku przed użyciem należy zapoznać się i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania dla każdego elementu.

6 Ustawianie ciśnienia PIP


Utrzymując blokadę zatyczki PEEP, przekręcać pokrętkę regulacji PIP w lewo, aż do ustawieniażądanego szczytowego ciśnienia wdechowego (i lub ii).

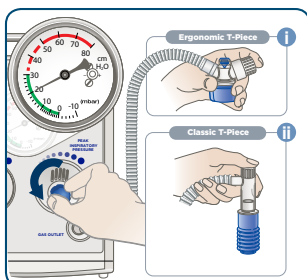

7 Ustawianie ciśnienia PEEP

Wyregulować zatyczkę PEEP w celu ustawieniażądanego poziomu PEEP.

Wyłączyć źródło gazu i odłączyć płuco testowe od złącza typu T. Przed podłączeniem maski lub rurki dotchawiczej należy upewnić się, że sztywne, plastikowe złącze płuca testowego także zostało odłączone od złącza typu T. Niewykonanie tej czynności może doprowadzić do wystąpienia niedopuszczalnych opóźnień w trakcie resuscytacji pacjenta (i lub ii).

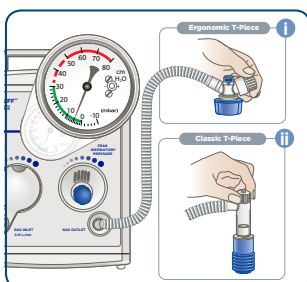


Niniejsza zawieszka służy jedynie jako instrukcja konfiguracji.

W każdym przypadku przed użyciem należy zapoznać się i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania dla każdego elementu.

II Resuscytacja


- 8** Wyregulować źródło gazu do żądanej prędkości przepływu.

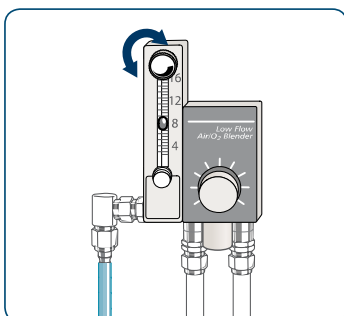

- 9** Dopasować złącze typu T do maski resuscytacyjnej dla niemowląt i założyć ją na usta i nos dziecka.

Prowadzić resuscytację, kładąc i zdejmując palec lub kciuk z zatyczki PEEP¹ w celu wykonania wdechu i wydechu (i lub ii).


1. Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe

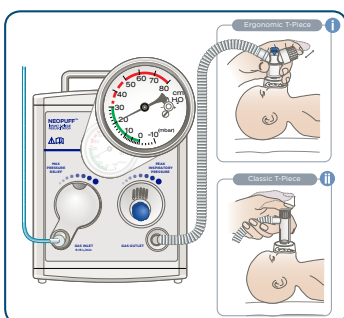

- 10** LUB dopasować złącze typu T do rurki dotchawiczej.

Prowadzić resuscytację, kładąc i zdejmując palec lub kciuk z zatyczki PEEP¹ w celu wykonania wdechu i wydechu (i lub ii).

1. Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe

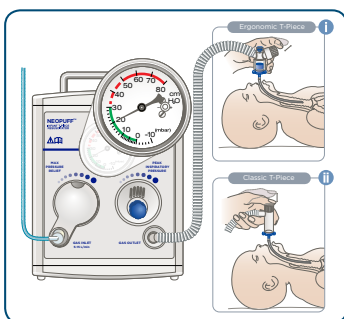

Niniejsza zawieszka służy jedynie jako instrukcja konfiguracji.

W każdym przypadku przed użyciem należy zapoznać się i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania dla każdego elementu.